



Occhiali Nystagmus TIPO 703

Descrizione del prodotto

I nostri affidabili e comprovati occhiali per nistagmo tipo 703 secondo il Prof. Frenzel per esami a breve e lungo termine con:

- » occhiali solidi
- » illuminazione diretta
- » Impugnatura della batteria regolabile
- » Attacco a baionetta

L'attacco a baionetta e i vari cavi di collegamento consentono di trasformare rapidamente gli occhiali da nistagmo in occhiali da nistagmo adatti a tutte le forme di esame. Ad esempio, per esami di posizionamento o su sedia girevole. Ordinando i componenti appropriati, gli occhiali per nistagmo possono essere assemblati per soddisfare le esigenze individuali del medico.

L'esame luminescente vero e proprio si svolge in una stanza buia o fortemente oscurata. L'illuminazione interna degli occhiali interrompe il contatto ottico del paziente con l'ambiente circostante (eliminazione della fissazione che inibisce il nistagmo). Allo stesso tempo, gli occhi luminosi sono particolarmente facili da osservare sotto le lenti d'ingrandimento. In molti casi, è possibile rilevare processi nistagmici patologici quando si guarda dritto davanti a sé, che non sono riconoscibili o non lo sono in modo affidabile senza occhiali, anche quando si guarda lateralmente.


L'alimentazione degli occhiali da nistagmo è fornita dall'impugnatura a batteria tipo 7.03.04. Opzionalmente, gli occhiali da nistagmo possono essere utilizzati con il cavo a baionetta tipo 7.03.05 e l'impugnatura a batteria tipo 7.03.04 o con il cavo di collegamento tipo 7.03.05 e l'alloggiamento della batteria tipo 504, nonché con il cavo di collegamento tipo 7.03.05 e l'alimentatore a spina tipo 506 per l'alimentazione (cavo, alloggiamento della batteria, alimentatore a spina e copricapo a clip non inclusi). L'impugnatura e l'alloggiamento della batteria sono alimentati da tre batterie C LR14/AM-2 (celle per bambini) da 1,5 volt ciascuna. L'impugnatura regolabile della batteria consente di regolare l'intensità della luce individualmente con una leggera rotazione dell'interruttore. L'alimentatore a spina funziona tramite una normale presa di corrente domestica (100-240V/AC, 50/60Hz).

Gli occhiali da nistagmo tipo 703 di Frenzel funzionano con due lampade da 4 volt, reperibili presso i rivenditori di articoli medicali.

Ambito di consegna



1x Occhiali da nistagmo tipo 703

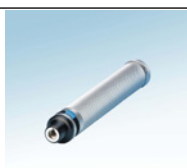

1x batteria tipo 7.03.04

Accessori opzionali



1x archetto a clip tipo 58.01.01

Il copricapo a clip garantisce un fissaggio sicuro degli occhiali da nistagmo davanti agli occhi del paziente.



Cavo a baionetta DEHAG tipo 7.03.05

Il cavo a baionetta collega l'occhiale da nistagmo con l'impugnatura a batteria tipo 7.03.04, consentendo così un lavoro mobile e indipendente dalla rete elettrica.

Cavo di collegamento DEHAG tipo 7.03.06



Per garantire l'alimentazione degli occhiali da nistagmo con il cavo di collegamento DEHAG, il cavo di collegamento tipo 7.03.06 può essere collegato all'attacco a baionetta degli occhiali da nistagmo al posto dell'impugnatura della batteria tipo 7.03.04 e può essere collegato all'alloggiamento della batteria DEHAG tipo 504 o con l'alimentatore a spina tipo 506.



Alimentatore a spina tipo 506

L'alimentatore a spina viene utilizzato per alimentare gli occhiali da nistagmo con una tensione di uscita di 4 V CC.



Alloggiamento per batteria DEHAG tipo 504


L'alloggiamento della batteria DEHAG viene utilizzato per alimentare gli occhiali da nistagmo e consente un lavoro regolabile e indipendente dalla rete elettrica nell'uso mobile.

Parti di ricambio



Lampada di ricambio tipo 507

L'occhiale Nystagmus 701 è alimentato da due lampadine da 4 volt; 0,23 amp; 1 watt (diametro della filettatura 3,5 mm x 0,35 mm).

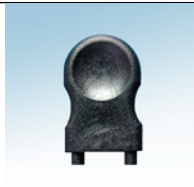

Tipo di copertura 57.00.02

Il coperchio protegge la lampadina.